



## BUDOWA URZĄDZENIA

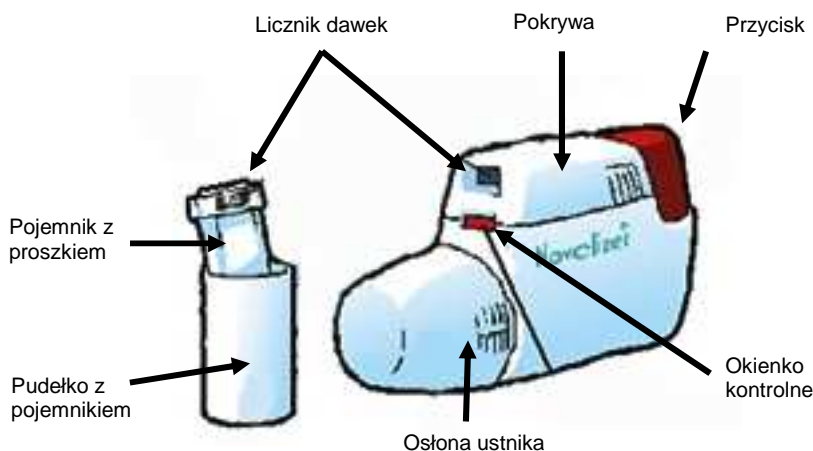

### UWAGA!

W trakcie inhalacji ważna jest Twoja postawa. Możesz przyjąć pozycję siedzącą lub stojącą. Pamiętaj aby twoje plecy był proste a ramiona opuszczone. Prawidłowa, skorygowana pozycja zapewni pełną ruchomość klatki piersiowej, aktywność odpowiednich mięśni oddechowych a w rezultacie skuteczną inhalację

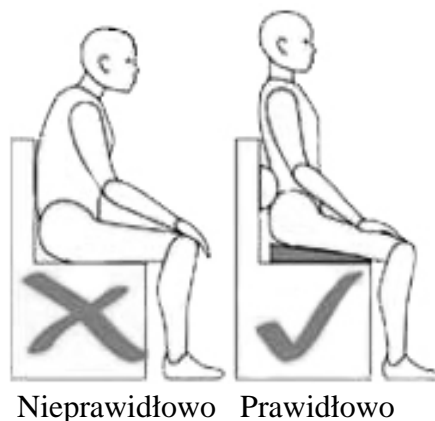

## INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

1. Zdejmij pokrywę z wierzchu inhalatora. Delikatnie naciśnij karbowane powierzchnie po obu stronach pokrywy, przesuń ją do przodu i unieś.
2. Otwórz pudełko z lekiem zdejmując folię ochronną
3. Pojemnik z lekiem umieść w inhalatorze mocno go przyciskając. Licznik dawek musi być skierowany w stronę ustnika.
4. W okienku kontrolnym pojawi się czerwony pasek i ilość dawek leku pozostających w inhalatorze
5. Załóż z powrotem pokrywę na wierzch inhalatora zamykając lek
6. Trzymając inhalator poziomo zdejmij osłonę z ustnika
7. Wciśnij do oporu czerwony przycisk. Usłyszysz kliknięcie. Kolor w okienku kontrolnym powinien zmienić się z czerwonego na zielony. Zielony kolor oznacza, że inhalator jest gotowy do użycia

8. Wykonaj głęboki wydech z dala od inhalatora
9. Włóż ustnik do ust i szczelnie obejmij ustami
10. Wykonaj głęboki długi natężony wdech ustami. Jeżeli inhalacja została wykonana prawidłowo usłyszysz „klik” a kolor w okienku kontrolnym zmieni się na czerwony
11. Zatrzymaj powietrze na 5-10s i jednocześnie wyjmij ustnik z ust i zamknij je.
12. Wykonaj spokojny wydech i powróć do normalnego oddychania
13. Załóż osłonę na ustnik


## Najczęściej popełniane błędy podczas inhalacji:

1. Potrząsanie urządzeniem po załadowaniu dawki !!
2. Dmuchięcie w urządzenie przed inhalacją !!
3. Nie szczelne objęcie ustnika ustami !!
4. Wdech przez nos !!
5. Zbyt krótkie zatrzymanie oddechu !!
6. Zbyt mała siła wdechu !!
7. Inhalacja bez załadowania dawki !!
8. Zbyt krótki wdech !!


## CZYSZCZENIE INHALATORA

Inhalator Novolizer należy czyścić systematycznie, przynajmniej przy każdej wymianie pojemnika z lekiem.

1. Zdejmij osłonę ochronną z ustnika. Następnie zdejmij ustnik pociągając go nieco do góry i ciągnąc do przodu, jak zaznaczono strzałkami na Ryc. 1

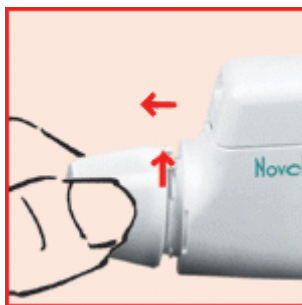

Ryc. 1.

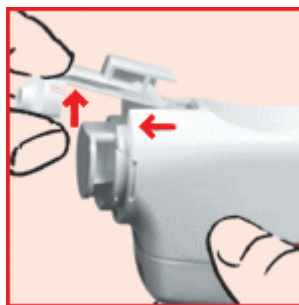

Ryc. 2.

2. Odwróć Novolizer o 180° w sposób pokazany na rysunku (Ryc. 2) i zdejmij dozownik pociągając do przodu i do góry.
3. Wytrząśnij resztki proszku z inhalatora.
4. Wytrzyj inhalator przy pomocy czystej, suchej, miękkiej szmatki. Nigdy nie stosuj wody ani żadnych środków czyszczących.
5. Umieść dozownik z powrotem w inhalatorze postępując odwrotnie niż podczas zdejmowania.
6. Umieść ustnik z powrotem w inhalatorze postępując odwrotnie niż podczas zdejmowania (wciśnij ustnik w kierunku czerwonego przycisku i lekko obróć do dołu).
7. Załóż osłonę ochronną na ustnik