



BUDOWA URZĄDZENIA

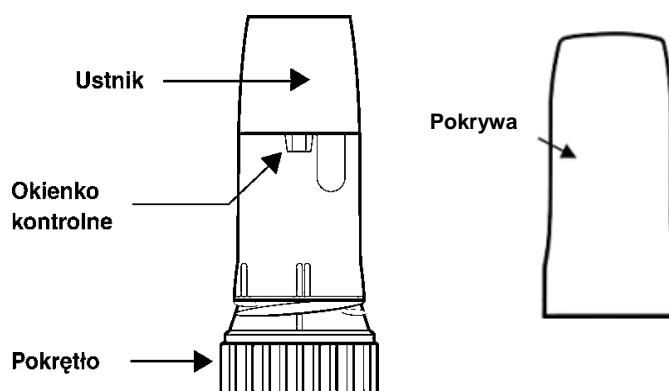

UWAGA!

W trakcie inhalacji ważna jest Twoja postawa. Możesz przyjąć pozycję siedzącą lub stojącą. Pamiętaj aby twoje plecy był proste a ramiona opuszczone. Prawidłowa, skorygowana pozycja zapewni pełną ruchomość klatki piersiowej, aktywność odpowiednich mięśni oddechowych a w rezultacie skuteczną inhalację

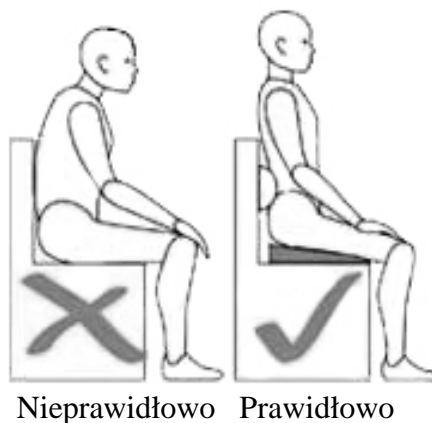

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

1. Odkręć i zdejmij pokrywę inhalatora.
2. Trzymając inhalator w pozycji pionowej, podstawą do dołu przekręć czerwone pokrętło najpierw w prawo do oporu a potem cofnij do pierwotnego położenia. Usłyszysz kliknięcie.
3. Wykonaj głęboki wydech z dala od inhalatora.
4. Włóż ustnik do ust i szczelnie obejmij go ustami.
5. Wykonaj głęboki, długi i natężony wdech przez usta.
6. Zatrzymaj powietrze na 5-10s i jednocześnie wyjmij aparat z ust zamykając je.
7. Wykonaj spokojny wydech i powróć do normalnego oddychania.
8. Załóż pokrywę na inhalator.
9. W okienku kontrolnym pod ustnikiem zobaczysz ile dawek leku pozostało w inhalatorze.

Turbuhaler


Najczęściej popełniane błędy podczas inhalacji:

1. Nie prawidłowy kierunek przekręcania czerwonej podstawy !!
2. Potrząsanie urządzeniem po załadowaniu dawki !!
3. Dmuchięcie w urządzenie przed inhalacją !!
4. Nie szczelne objęcie ustnika ustami !!
5. Wdech przez nos !!
6. Zbyt mała siła wdechu !!
7. Zbyt krótki wdech !!
8. Zbyt krótkie zatrzymanie oddechu !!
9. Inhalacja bez załadowania dawki !!


*Gdy w okienku kontrolnym pojawi się po raz pierwszy czerwony znak oznacza to, że w urządzeniu pozostało około 20 dawek leku (Rys. 1).

Gdy czerwony pasek osiągnie dolny brzeg okienka kontrolnego (Rys. 2), oznacza to, że inhalator nie może być dalej używany. Dawka leku uwalniana z inhalatora może być wtedy zbyt mała.

Podczas wstrząsania inhalatorem słyszalny jest charakterystyczny dźwięk przesypywanego środka pochłaniającego wilgoć.

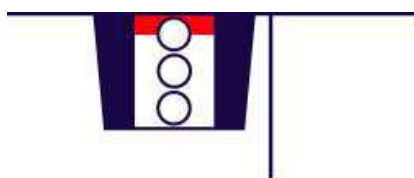

Rys. 1

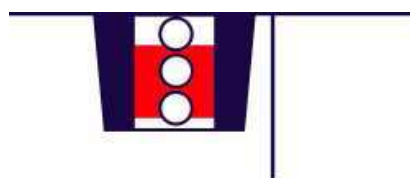

Rys. 2

CZYSZCZENIE INHALATORA:

Jeżeli to konieczne zewnętrzną część ustnika przetrzyj wilgotną (nie mokrą) ściereczką.